

Hướng dẫn nhanh cho quý vị về cách sử dụng NovoPen® 6

Ghi chép
liều lượng insulin
điển ra
tại đây



NovoPen® 6



Đây là tờ hướng dẫn nhanh. Xin quý vị đọc những Chỉ dẫn về cách Sử dụng được cung cấp kèm theo NovoPen® 6 để biết thông tin đầy đủ.

Chuẩn bị NovoPen® 6



Gắn ống thuốc insulin vào

Tháo nắp của bút chích ra. Vận khung giữ ống thuốc ra. Thanh pít-tông có thể bị nhô ra khỏi bút chích. Nếu vậy, hãy đẩy nó vào cho đến khi nó không nhô ra nữa.



Đẩy một ống thuốc insulin mới vào khung giữ ống thuốc với phần đầu vận vào trước. Vận khung giữ ống thuốc vào trở lại.



Gắn một kim mới

Xé bỏ vạt giấy. Đẩy kim thẳng vào bút chích. Vận cho đến khi chặt. Tháo hai nắp kim ra. Giữ lại nắp kim phía ngoài.

Chích thuốc



⚠️ LUÔN LUÔN thử dòng chảy của insulin

Chọn 2 đơn vị insulin rồi bấm nút liều lượng cho tới khi chức năng đếm liều lượng hiển thị "0". Thử nghiệm dòng chảy insulin hoàn tất khi quý vị thấy insulin trào ra và không còn khoảng trống giữa đầu của thanh pít-tông và pít-tông.



Chọn liều của mình

Kéo nút liều lượng ra. Hãy chắc chắn là chức năng đếm liều lượng hiển thị "0" trước khi quý vị bắt đầu. Vận nút liều lượng để chọn liều lượng mà quý vị cần.



Chích liều của mình


Gắn kim vào. Bấm nút liều lượng cho đến khi chức năng đếm liều lượng hiển thị "0". Đếm chậm đến 6 trước khi quý vị rút kim ra khỏi da. Tháo kim rồi vứt bỏ kim một cách an toàn. Đậy nắp bút chích lại.

Cách kiểm tra liều cuối cùng



Kéo nút liều lượng ra

Phải chắc chắn là chức năng đếm liều lượng hiển thị số "0" trước khi quý vị bắt đầu.

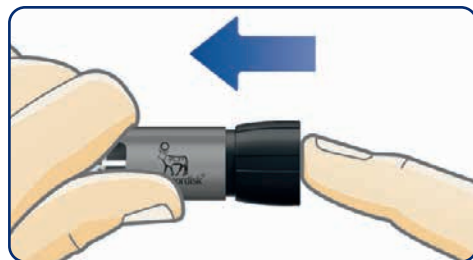

Ấn nút liều lượng trở vào

Chức năng nhớ liều lượng giờ sẽ hiển thị chi tiết của liều cuối cùng của quý vị.



Đọc chức năng nhớ

Thí dụ này cho thấy 12 đơn vị đã được chích 1 giờ, 52 phút và 3 giây trước đây.

Cách sử dụng NovoPen® 6

Xin xem hướng dẫn nhanh này để biết cách chuẩn bị và hoàn tất các mũi chích bằng NovoPen® 6.



Quét mã QR để xem video



NovoPen® 6 là thương hiệu có đăng ký của Novo Nordisk A/S.
Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd. ABN 40 002 879 996. Level 10, 118 Mount Street, North Sydney, NSW, 2060.
Novo Nordisk Customer Care (Australia) 1800 668 626. www.novonordisk.com.au
© Thương hiệu có đăng ký của Novo Nordisk A/S. AU23NP600028. NONOCH0039. Ngày soạn thảo: tháng Chín 2023.

NovoPen® 6

NovoPen® 6 cung cấp liều tối đa là 60 đơn vị và mỗi lần tăng liều là 1 đơn vị.