

NovoPen® 4

Bir bakışta NovoPen® 4 kaleminiz



NovoPen® 4



Kalem kapağı
İnsülini ışıktan korumak için
her zaman yerine takın.

Doz sayacı
Seçtiğiniz dozu
görmek
için kullanın.


Doz göstergesi

Doz düğmesi
Dozunuzu seçmek
için döndürün.
Dozunuzu enjekte etmek
için aşağı bastırın.

Tek kullanımlık iğne




Penfill® kartuşu

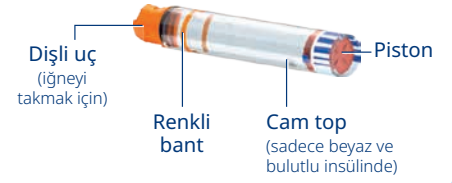


Kullanmak için hızlı adım adım kılavuz

PENFILL® KARTUŞUNU YERLEŞTİRİN VE İĞNEYİ TAKIN


ADIM 1 Kalem kapağını çıkarın

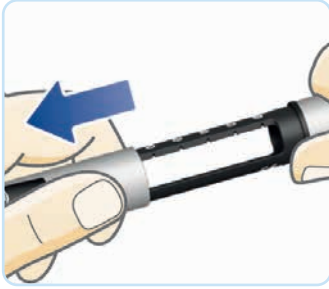


ADIM 2 Kartuş haznesini çevirerek çıkartın

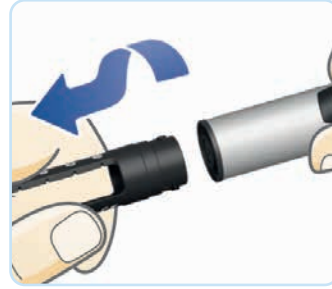


ADIM 3 Piston çubuğu dışarı çıkarsa, durana kadar içeri itin

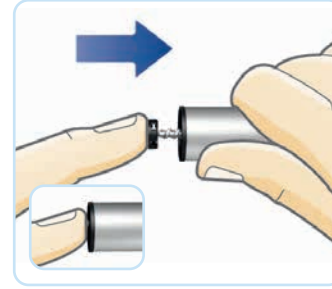

ADIM 4 Kartuşu, dişli ucu önce girecek şekilde takın

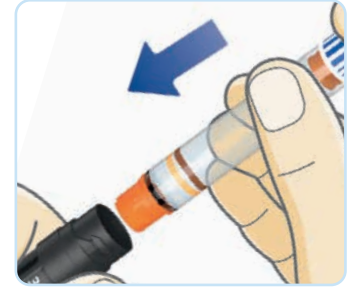



ADIM 5 Kartuş haznesini bir tık sesi duyana veya hissedene kadar çevirerek takın

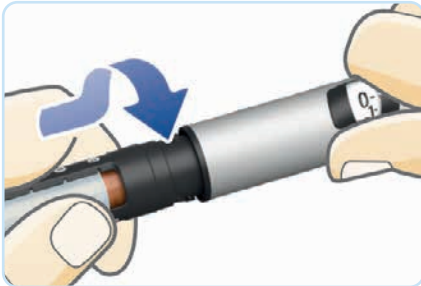

ADIM 6 Kağıt şeridi yeni iğneden çıkarın ve iğneyi doğrudan kalemin üzerine bastırın



ADIM 7 Dış ve iç iğne kapaklarını çıkarın. İğnenin güvenli bir şekilde atılması için dış kapağı saklayın

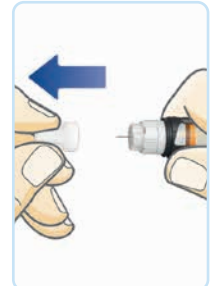
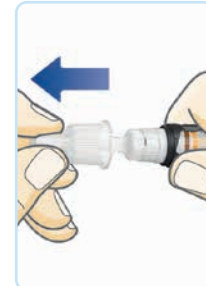


NovoPen® 4 kaleminizi nasıl kullanacağınıza dair tam bir açıklama için lütfen kaleminizle birlikte verilen Kullanım Talimatlarını okuyun. Önemli güvenlik bilgileri için lütfen sayfanın arkasına bakın.

PENFILL® KARTUŞUNU TAKTIKTAN SONRA HER ZAMAN İNSÜLİN AKIŞINI TEST EDİN

- ADIM 1** Piston çubuğu başı ile piston arasındaki boşluğu ve hava kabarcıklarını giderin.
- ADIM 2** Doz düğmesini dışarı çekin ve **2 birimi** seçin.
- ADIM 3** Doz sayacı '0' sayısını gösterene kadar doz düğmesine basın.

İnsülin görünmüyorsa VEYA bir boşluk varsa, kalem kullanıma hazır olana kadar 1-3 arasındaki adımları tekrarlayın.

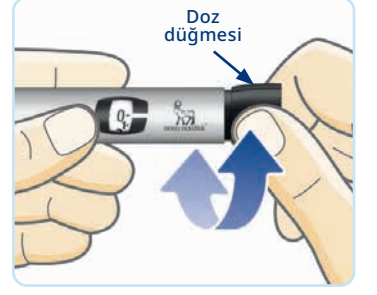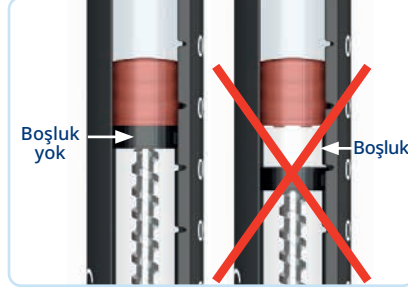

İnsülin akışını kontrol etmezseniz, insülin dozunuzun tamamını alamayabilirsiniz.

İNSÜLİNİNİZİ ENJEKTE EDİN

ADIM 1 Doz sayacı 0'dayken, doz düğmesini dışarı çekin ve enjekte etmek istediğiniz birim sayısını seçmek için çevirin.



ADIM 2 İğneyi sokun ve doz sayacı 0 sayısını gösterene kadar doz düğmesine basın. İğneyi çıkarmadan önce yavaşça 6'ya kadar sayın.




İğneyi güvenli bir şekilde çıkarıp atın ve kalem kapağını tekrar takın.

ENJEKSİYON BÖLGELERİ


Ana enjeksiyon bölgeleri uyluklar, mide, kalçalar veya üst kolların arkasıdır. Doktorunuza veya hemşirenize sizin için hangi bölgelerin önerildiğini sorun.

Önerilen enjeksiyon bölgenizi işaretleyin

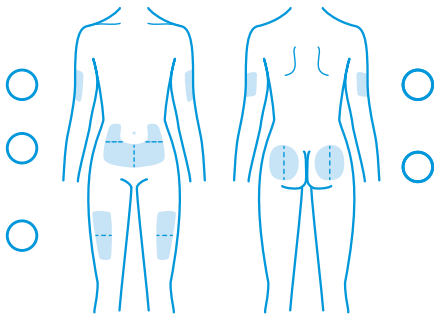

Sizi rahatsız etmemesi için, her enjeksiyon için farklı bir yer seçtiğinizden emin olun.

- Enjeksiyon bölgelerini yarıya veya dörde bölün ve her hafta farklı bir bölümü kullanın.
- Her bölgede, enjeksiyon yerini son enjeksiyon noktasından itibaren saat yönünde yaklaşık bir parmak genişlik mesafesinde değiştirin.

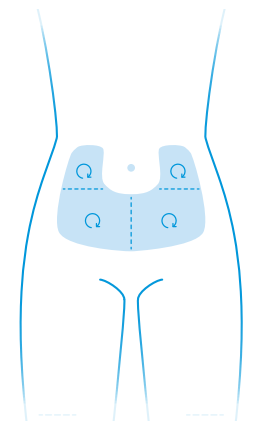

DAHA FAZLA BİLGİ VEYA DESTEK İÇİN



Kaleminizi nasıl kullanacağınızla veya teknik konularla ilgili sorularınız varsa Novo Nordisk Medical Information'ı **1800 668 626** numaralı telefondan arayın.

NovoPen® 4

Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd. Level 10, 118 Mount Street, North Sydney NSW 2060.
ABN 40 002 879 996. Novo Nordisk® Medical Information (Australia) 1800 668 626. www.novonordisk.com.au.
© Novo Nordisk A/S. nin tescilli ticari markasıdır. NONO0Y0148. AU24NP400021. Ekim 2024.

