


NovoPen® 4

Sơ qua về bút chích NovoPen® 4 của quý vị



NovoPen® 4

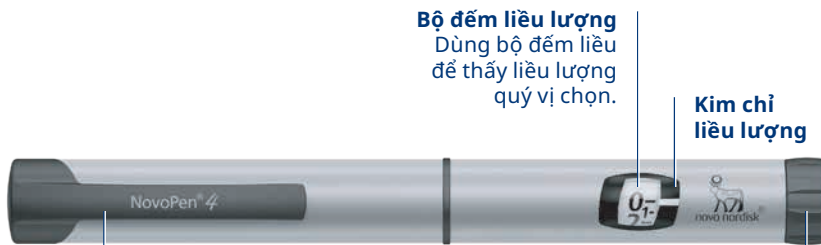

Bộ đếm liều lượng
Dùng bộ đếm liều lượng để thấy liều lượng quý vị chọn.

Kim chỉ liều lượng

Nắp bút chích

Luôn luôn đóng nắp bút chích để bảo vệ insulin khỏi ánh sáng.

Nút bấm liều lượng

Xoay nút bấm liều lượng để chọn liều thuốc của quý vị. Ấn nút này xuống để chích liều thuốc của quý vị.

Kim chích dùng một lần




Nắp ngoài kim

Nắp kim trong

Kim chích

Mẫu giấy

Ống thuốc Penfill®

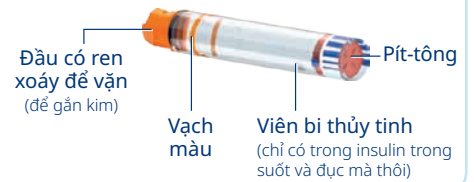

Đầu có ren xoay để vận (để gắn kim)


Vạch màu

Viên bi thủy tinh (chỉ có trong insulin trong suốt và đục mà thôi)


Hướng dẫn nhanh từng bước về cách sử dụng

LẮP ỐNG THUỐC PENFILL® VÀO RỜI GẮN KIM


BƯỚC 1 Tháo nắp bút ra

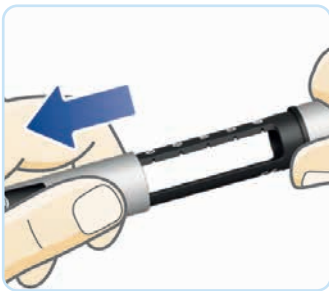


BƯỚC 2 Vận để lấy khung giữ ống thuốc ra

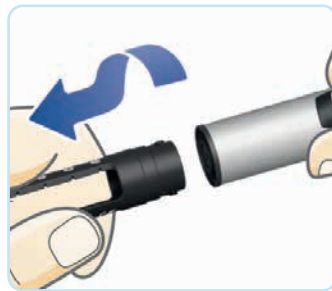


BƯỚC 3 Nếu thanh pít-tông thò ra ngoài, hãy đẩy nó vào cho đến khi nó dừng lại

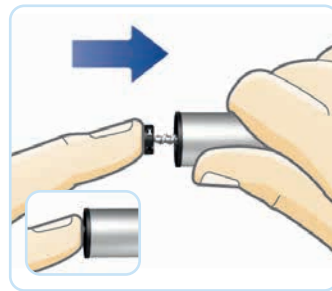

BƯỚC 4 Lắp ống thuốc vào, đầu có ren xoay vào trước

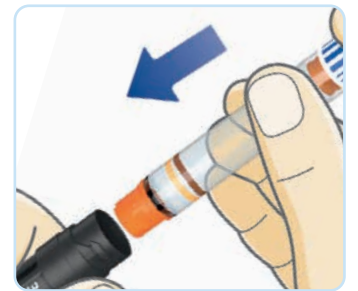



BƯỚC 5 Vận để lắp khung giữ ống thuốc trở lại cho tới khi quý vị nghe thấy hoặc cảm nhận được tiếng click

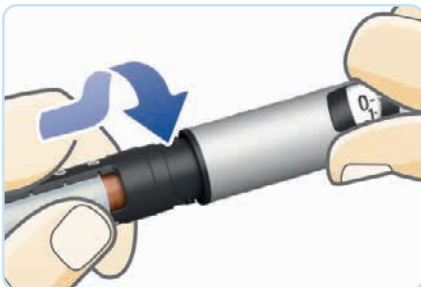

BƯỚC 6 Tháo bỏ mẫu giấy khỏi kim mới rời đẩy kim thẳng vào bút chích



BƯỚC 7 Tháo cả nắp ngoài và nắp trong của kim ra. Giữ lại nắp ngoài để vứt bỏ kim một cách an toàn

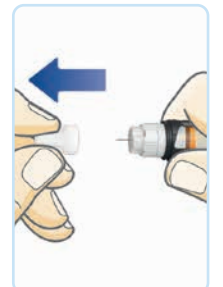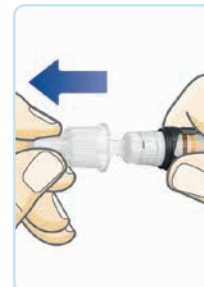

Muốn có nội dung giải thích đầy đủ về cách sử dụng bút chích NovoPen® 4 của quý vị, xin quý vị đọc tờ Hướng dẫn về cách sử dụng được cung cấp cùng với bút chích của quý vị. Xin quý vị lật sang trang sau để biết các thông tin quan trọng về tính an toàn.




LUÔN THỬ DÒNG CHẢY CỦA INSULIN SAU KHI LẮP ỐNG THUỐC PENFILL® VÀO

BƯỚC 1 Loại bỏ bất kỳ khoảng trống nào giữa đầu thanh pít-tông và pít-tông, và các bong bóng không khí.

BƯỚC 2 Kéo nút chọn liều ra rồi xoay để chọn **2 đơn vị**.

BƯỚC 3 Ấn nút chọn liều cho đến khi bộ đếm liều cho thấy số **'0'**.

Nếu không có insulin xuất hiện HOẶC có khoảng trống, hãy lặp lại các bước từ 1-3 cho tới khi bút chích đã sẵn sàng để sử dụng.

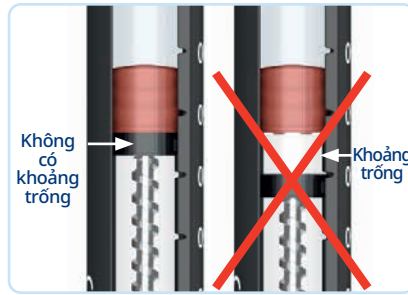

Nếu không kiểm tra dòng chảy của insulin, quý vị có thể không nhận được đầy đủ liều insulin của mình.

CHÍCH LIỀU INSULIN CỦA QUÝ VỊ

BƯỚC 1 Với bộ đếm liều ở số **0**, kéo nút chọn liều ra rồi xoay để chọn số đơn vị mà quý vị muốn chích.



BƯỚC 2 Lắp kim vào rồi ấn nút chọn liều cho đến khi bộ đếm liều cho thấy số **0**. Đếm chậm chậm đến **6** trước khi quý vị rút kim ra.




Tháo kim ra rồi vứt bỏ một cách an toàn và đặt nắp bút chích trở lại.

VÙNG CHÍCH THUỐC


Các vùng chính để chích thuốc là đùi, bụng, mông hoặc phía sau bắp tay. Hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của quý vị xem những vùng nào thích hợp để quý vị chích thuốc.

Hãy đánh dấu vùng chích thuốc được khuyến nghị

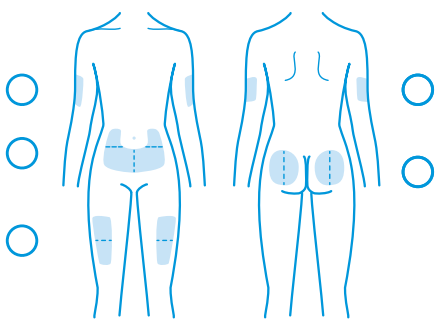

Để thoải mái hơn, hãy bảo đảm là quý vị chọn các chỗ khác nhau cho mỗi lần chích.

- Chia các vùng chích thuốc ra thành phân nửa hoặc một phần tư, rồi mỗi tuần chích ở một nửa/một phần tư khác nhau.
- Trong mỗi phân nửa hoặc một phần tư, hãy luân phiên chỗ chích thuốc theo chiều kim đồng hồ, cách điểm chích lần sau cùng khoảng bằng bề rộng của ngón tay.

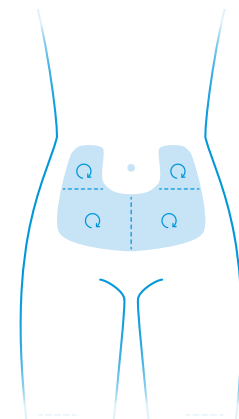

CẦN THÔNG TIN HOẶC SỰ HỖ TRỢ THÊM



Có các câu hỏi về cách sử dụng bút chích của quý vị, hoặc các vấn đề kỹ thuật? Hãy gọi cho Thông tin Y khoa của Novo Nordisk – **1800 668 626**

NovoPen® 4

Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd. Level 10, 118 Mount Street, North Sydney NSW 2060.
ABN 40 002 879 996. Thông tin Y khoa của Novo Nordisk® (Úc Châu) 1800 668 626. www.novonordisk.com.au.
© Nhãn hiệu có đăng ký của Novo Nordisk A/S. NON00Y0148. AU24NP400019. Tháng 10 năm 2024.

